
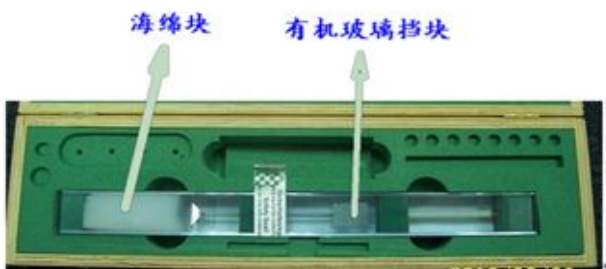


## 支架返修包装指导

为尽量避免支架在运输过程中的损坏，请严格按照原来的方式放置支架，并注意下列事项。

1. 取下支架，如右图所示正确地放入支架木盒里。注意两块支架海绵和配重的位置，取走其他不需维修的物件。

如果防辐射装置完好，请与两个定位图，以及坩埚等一并取出，不用寄来

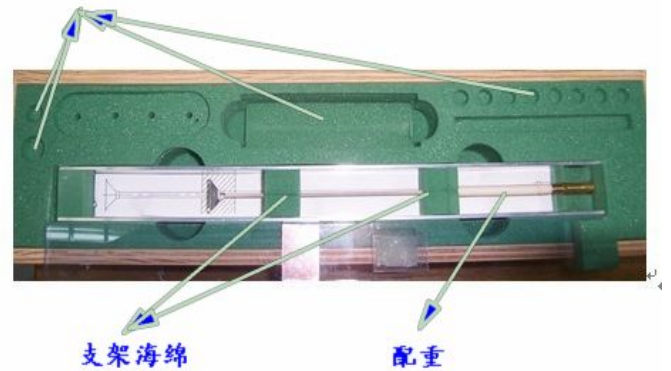

2. 盖上有有机玻璃的盖子。注意盖子上的有机玻璃挡块的位置，此为防止支架在运输过程中前移。为保险起见，建议在支架前方放入海绵或软纸。

3. 盖上木盒，锁上盒扣。把木盒放入适当的长方形纸箱内。四周一定要放上海绵等填充物。



4. 请填写《支架维修联系单》，与待修支架一起寄给我们。

耐驰科学仪器商贸（上海）有限公司

NETZSCH Scientific Instruments Trading (Shanghai) Ltd.

上海市外高桥保税区富特北路 456 号 1 号楼 3 层 A 部位，邮编 200131，电话 021-51089255

# 支架维修联系单

(务必与支架一起寄送)

送修单位	
仪器型号	
送修人	
电话	
邮箱	
回寄地址和邮编	
支架损坏情况描述及可能原因分析   	
是否做过有毒的、有辐射的样品 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，具体样品是：	
请确认放支架的玻璃盖盒子和木盒是原包装  <input type="checkbox"/> 是原包装 <input type="checkbox"/> 不是原包装	
请确认已将不需维修的物品取出，下列物品将寄来维修： <input type="checkbox"/> 支架 <input type="checkbox"/> 防辐射片 <input type="checkbox"/> 定位圈	

用户签名：

签名日期：